
SURPLUS **PRO V2.0**



BRUKERMANUAL

INTRODUKSJON

Fordelene med massasjepistol er mange. Det er godt kjent at massasje reduserer muskelspenninger og relaterte plager. Ypperlig for oppvarming før en treningsøkt og perfekt som hjelp til restitusjon etter trening. Apparatet lindrer treningssmerter og stivhet samt fremmer bedre blodsirkulasjon, som igjen gir økt bevegelighet.

Den store fordelen med Massasjepistol sammenlignet med tradisjonell massasje: Apparatet arbeider på opptil 3200 interer pr. minutt, og oppnår derfor et høyt nivå av nevronal stimulering. 20 ulike moduser!


Vi anbefaler at du leser nøye gjennom hele brukermanualen, og at du bruker produktet som vist i brukermanualen.

INNHOLD

Inkludert i esken:

- (1. 1 x Massasjepistol
- (2. 1 x Bærekoffert
- (3. 6 x Massasjehoder
- (4. 1 x Lader
- (5. 1 x Brukermanual


1.

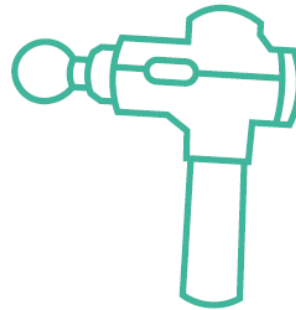


2.




3.

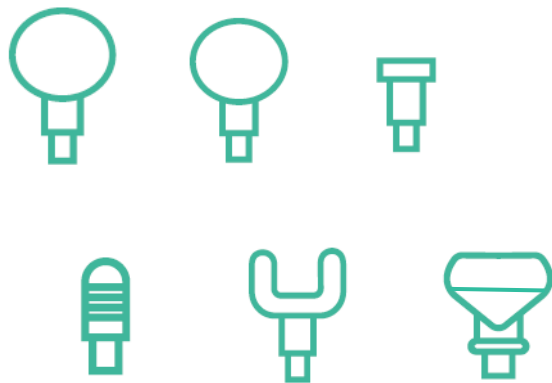

4.

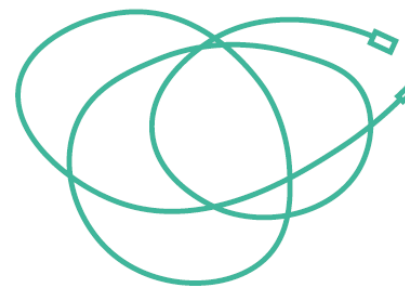

5.

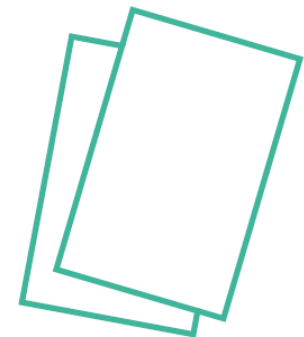

MASSASJEHODER



- **Pute** - Passelig for nybegynneren. Har det mykeste materialet med størst overflate. Brukes på ømme områder som nakken ol.



- **Rund** - Det runde massasjehodet er ett trinn opp fra puten. Det dekker omtrent samme område, men materialet er noe hardere. Passer fint til store muskelgrupper som quads, lats og pecs.



- **Gaffel** - Gaffelhodet brukes hovedsakelig på ryggmusklene, underarmer og ankel/legg. Noen foretrekker å ha to kontaktpunkter på visse muskelgrupper for å hjelpe mot en "kilende" følelse.



- **Flat** - Det flate hodet fungerer generelt best for å dekke et større område på en tettere muskelgruppe som hamstrings eller setemusklene. Det harde materialet absorberer ikke noe av slagene og lar det trenge dypere inn i vevet.



- **Kule** - Kulefestet har den minste overflaten av alle massasjehodene. Hvis du foretrekker dypere og mer intenst trykk, anbefaler vi dette hodet. Kulen blir vanligvis brukt for litt mindre muskelgrupper/muskelgrupper som er vanskelige å nå.

SLIK FUNGERER MASSASJEPISTOLEN

- Juster og fest batteriet i bunnen av enheten – sørg for at den sitter ordentlig i festet.
- Slå på massasjepistolen ved å flytte strømbryteren på undersiden av batteriet til "ON". For å slå den av flytter man strømbryteren til "OFF".
- Når massasjepistolen er påslått, trykk én gang på strømknappen for å aktivere enheten. Deretter kan du justere mellom 20 nivåer ved å trykke inn "+" og "-".
- For å slå av massasjepistolen trykker du på strømknappen og deretter flytter strømbryteren under batteriet til "OFF".
- Når produktet er avslått kan du bytte mellom massasjehodene. Press inn enden av massasjehodet inn i "løpet" på massasjepistolen og se til at den sitter. For å bytte så drar du enkelt ut massasjehodet og setter inn den som er ønsket.
- For å fjerne batteriet, trykk lett på batteriutløserknappen med tommelen. Trekk deretter batteriet nedover med den andre hånden.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL: For å redusere risikoen for elektrisk støt, brann og personskade, må dette produktet brukes i overensstemmelse med følgende instruksjoner:

- Kun til bruk for voksne.
- Bruk massasjepistolen kun på kroppens muskler etter ønske uten at du skal føle smerte eller ubehag. Den må ikke brukes på hodet eller på noe hardt som beinområder på kroppen.
- Blåmerker kan oppstå uavhengig av nivå eller trykk. Sjekk behandlet område ofte og umiddelbart ved første tegn til ubehag.
- Hold fingrene, hår og andre kroppsdeler borte fra skaftet og baksiden av "løpet" da det kan komme i klem.
- Ikke plasser noen gjenstander i ventilasjonshullene til massasjepistolen.
- Ikke la massasjepistolen komme i kontakt med vann.
- Lad kun med lader som følger med i kofferten.
- Ikke tukle eller modifier massasjepistolen på noen måte.
- Ikke la massasjepistolen stå på eller lade uten tilsyn.

SPESIFIKASJONER



1. Batteriindikator / Veksle mellom 20 nivåer

2. Velg mellom 6 massasjehoder

3. Batteriutløserknapp

4. Litiumbatteri

5. ON / OFF -bryter

- Kraftig børsteløs motor med høyt dreiemoment.
- Avtagbart litiumbatteri.
- 20 forskjellige nivåer.
- Kontaktløs og lett. Lader følger med.
- Utskiftbare massasjehoder (x6).

LADEINSTRUKSER

- Lad batteriet fullt opp i opptil 6 timer før førstegangsbruk.
- For å lade, koble til 24V adapteren til batteriets ladeport og koble laderen i veggen.
- LED-lyset skal pulsere for å vise batterinivå og for å vise at den tar ladning.
- Massasjepistolen er fulladet når alle lysene slutter å pulsere og lyser konstant.
- Batteriet kan lades uansett batteriprosent.
- Det er ikke anbefalt å tømme batteriet helt, prøv å lade den opp når den har rundt 20%.
- Massasjepistolen kan brukes opptil 2 timer avhengig av nivå og trykk fra bruker.

ADVARSEL

Massasjepistolen skal ikke brukes uten godkjenning fra din lege hvis noe av det følgende gjelder: Graviditet, har pacemaker, er nylig operert, epilepsi, migrene, nylige leddutskiftninger, metallstifter eller plater og generelt bekymringer for din fysiske helse. Disse kontraindikasjonene betyr ikke at du ikke er i stand til å bruke massasjepistolen, men vi anbefaler deg å konsultere med en lege først.

Svake og unge bør ledsages av en voksen om de skal bruke massasjepistolen.

- Ikke dypp ned i vann.
- Ikke oppbevar produktet i solen eller i varme temperaturer.
- Hold ventilasjonsåpningene fri for støv og rusk.
- Ikke fjern skruer eller forsøk å demontere.
- Ikke bruk kontinuerlig i mer enn én time. La enheten hvile i 30 minutter før den brukes på nytt.
- Koble laderen fra enhetens batteri etter lading eller før bruk.
- Kun til bruk for voksne. Ikke bruk den hvis du er skadet. Rådfør deg med legen din før du bruker dette produktet.

REKLAMASJON

Skulle det oppstå problemer med produktet som følger av en produksjonsfeil ol. vil det bli forsøkt rettet eller levert ut nytt tilsvarende produkt.

Dette dekkes ikke av reklamasjon:

- Skade på produkt som følge av brukerfeil eller hardt bruk.
- Uautorisert reparasjon eller modifikasjon av produktet.
- Instruksene fra brukermanual er ikke fulgt.
- Skade som overstiger kostnaden for produktet.
- Feillagring av produkt eller mangel på vedlikehold.
- Unnlattelse av å fremlegge datert kjøpsbevis.